


# ИНСТРУКЦИЯ REVLINЕ RL 025 PANDA

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ  
ЗВУКОВАЯ  
ЗУБНАЯ ЩЕТКА

1-5  
ЛЕТ

## Поздравляем!

Вы стали обладателем высокотехнологичного устройства, которое позволит детским зубам и деснам быть красивыми и здоровыми. Ежедневное использование зубной щетки значительно снижает риск стоматологических заболеваний. Безопасна для тонкой зубной эмали молочных зубов. Рекомендуются для детей в возрасте 1-5 лет.

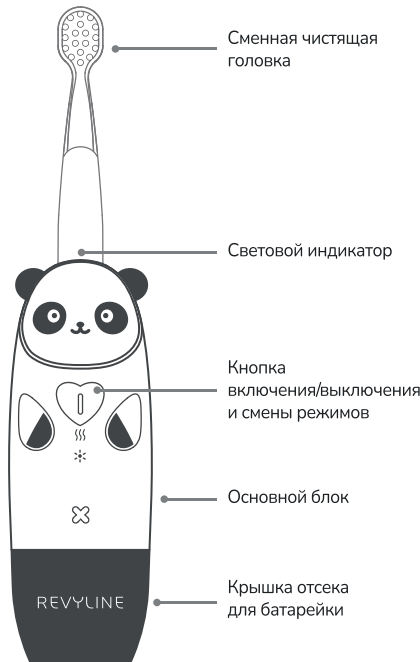

## Меры предосторожности

Перед первым использованием щетки Revlyne RL 025 Panda внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации и сохраните ее.

- Используйте только фирменные насадки и аксессуары.
- Если щетка не используется длительное время, рекомендуется вынуть батарейку, положить щетку в коробку и хранить в прохладном месте.
- Не вставляйте посторонние предметы в гнездо для сменной насадки.
- Запрещено оставлять прибор работающим в течение длительного времени. Время непрерывной работы не должно составлять более 10 минут.
- Не используйте прибор при наличии ранок в полости рта или на языке.
- Использование щетки детьми возможно только под присмотром взрослых.
- Запрещается бегать или ходить во время чистки зубов, когда щетка находится во рту.
- Электрическую зубную щетку Revlyne RL 025 Panda не рекомендуется использовать лицами с ограниченными физическими возможностями, психическими нарушениями и отсутствием опыта использования подобного прибора.
- Храните устройство вдали от прямых солнечных лучей в сухом и хорошо проветриваемом месте при температуре не ниже -7 и не выше +40 градусов по Цельсию.
- Утилизация прибора и его электрических батареек должна осуществляться в соответствии с общепринятыми правилами.

## Начало использования

- Выньте щетку из упаковки.
- Крышку отсека батарейки поверните против часовой стрелки и снимите ее.
- Извлеките из отсека батарейку, снимите защитную пленку и вставьте обратно.
- Закройте крышку и поверните ее по часовой стрелке.

## Выбор режима чистки

Выбор необходимого режима работы осуществляется последовательным нажатием кнопки включения.

Зубная щетка Revlyne RL 025 Panda может работать в четырех режимах:

- START** – этот режим без вибрации, он рекомендован детям, которые еще не привыкли к вибрирующему режиму. Его рекомендуется использовать для знакомства ребенка со щеткой.
- SOFT** – характеризуется низкой амплитудой колебания щетинок, невысокой частотой вибрации. Частота колебаний щетинок – 12 000 в минуту.
- NORMAL** – рекомендована для регулярного использования. Частота колебаний щетинок – 16 000 в минуту.
- INTENSIVE** – максимальная частота колебаний щетинок – 20 000 в минуту.

Любой последний выбранный режим сохраняется в памяти и при последующем использовании щетки включается в первую очередь.

## Процесс чистки

Аккуратно наденьте насадку на посадочное место. Прежде чем приступить к чистке зубов, смочите водой чистящую головку зубной щетки с нанесенной на нее зубной пастой. Это поможет зубной пасте лучше воздействовать на поверхность зубов во время чистки.

Поднесите насадку щетки к поверхности зубов, расположив параллельно линии десен. Включите щетку. Производите чистку мягко. Не надавливайте слишком сильно, иначе можете травмировать поверхность зубов и десен. Перемещайте чистящую головку медленно, совершая вращательно-возвратные движения. Меняйте зоны чистки каждые 30 секунд, согласно сигналам таймера. После завершения чистки полость рта необходимо тщательно прополоскать чистой водой.

## Гарантия

Гарантия на прибор – 2 года.

Гарантированное техническое обслуживание прибора осуществляется в течение действующего гарантийного срока бесплатно. Далее обслуживание щетки осуществляется за счет покупателя.

Гарантия не распространяется:

- На расходные материалы и комплектующие.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие применения их не по назначению; неосторожного и/или небрежного использования (включая перегрузку), приведшего к повреждениям; модификации, вскрытия и/или ремонта неуполномоченной организацией (частным лицом); нарушения правил эксплуатации, и/или хранения, и/или транспортировки, указанных в руководстве по эксплуатации.
- На товары, которые вышли из строя и/или получили дефекты вследствие подключения к неправильному источнику питания.
- На товары, эксплуатировавшиеся с неустранимыми недостатками.
- На неисправности, которые вызваны не зависящими от производителя причинами, такими как действия третьих

лиц, явления природы и стихийные бедствия, домашние и дикие животные, насекомые, попадание внутрь посторонних предметов и жидкостей.

- На внешние и внутренние загрязнения, царапины, трещины, потертости и прочие механические повреждения, возникшие в процессе эксплуатации и в результате естественного износа.

## Комплектация

- Основной блок щетки.
- Сменная насадка – 2 шт.
- Элемент питания, тип AAA – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации.
- Гарантийный талон.

## Технические характеристики

Модель: RL 025 Panda

Предназначена для эффективной чистки зубов.

- Частота колебаний: 12 000–20 000 в мин.
- Режимы работы: 4
- Размер изделия: 160.5x35x35 мм
- Номинальное напряжение: 1,5 В
- Мощность: 0,51 Вт
- Номинальная сила тока: 0,34 А
- Уровень влагозащиты: IPX7  
Допускается промывание под проточной водой после использования.
- Материал корпуса: ABS + Silica gel
- Материал насадки: PC + нейлон Dupont
- Питание: батарейка AAA
- Гарантия: 2 года
- Хранить при комнатной температуре.

По всем вопросам  
обращайтесь на горячую линию:

8 (800) 775-38-49

www.revlyne.ru

## Гарантийный талон

Название организации

Место продажи

Место для печати

Произведено по заказу ИП Салимгареевой А. А.:  
г. Элиста, мкр. 1, д. 12

Изготовитель: Shenzhen Fortunecome Technology Co., Ltd  
No.57 Shangxia Road, Shangxiawei, Yuanshan Street,  
Longgang District, Shenzhen City, China